

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY OHLEDUPLNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Incidin[®] OxyFoam S & OxyWipe S


Sporicidní a plně virucidní dezinfekční produkty s čistícím účinkem, k přímému použití na bázi vysokorychlostního peroxidu vodíku - Hi-speed H₂O₂

Zcela nové a převratné složení přípravků Incidin OxyFoam S a Incidin OxyWipe S, jejichž účinnou látku tvoří patentovaná* forma peroxidu vodíku s kompletním spektrem účinnosti.

Přípravky jsou nejen účinné proti širokému spektru mikroorganismů, ale i vysoce bezpečné - nezanechávají žádná škodlivá rezidua.

Přednosti přípravků OxyFoam S a Incidin OxyWipe S

- ▲ Obsahují vysokorychlostní H₂O₂
- ▲ Bez škodlivých reziduí - aktivní substance se rozkládá na vodu a kyslík
- ▲ Sporicidní a plně virucidní přípravky pro všechny typy materiálů a všechny typy zdravotnických pracovišť
- ▲ Excelentní materiálová kompatibilita - vhodné i pro velmi citlivé materiály

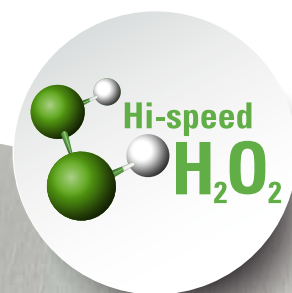

Incidin® OxyFoam S a OxyWipe S

Sporicidní a plně virucidní dezinfekční produkty s čistícím účinkem, k přímému použití na bázi vysokorychlostního peroxidu vodíku - H₂O₂™



3 MIN
Sporicidní proti
Clostridium diff
(susp. test)



2 MIN
Plně virucidní
(nízká zátěž)



1 MIN
Účinnost
na bakterie
a kvasinky
EN 16615

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	ZÍSKANÉ VÝHODY
VYSOKÁ ÚČINNOST	Kompletní spektrum účinnosti při krátkém času expozice
BEZPEČÍ	Účinná látka se rozkládá na vodu a kyslík. Bezpečné pro člověka i životní prostředí. Skvělá materiálová kompatibilita.
JEDNODUCHÁ APLIKACE	Čistí a dezinfikují v jednom kroku. Vždy po ruce, připraveny k okamžitému použití.

Testování účinnosti	Incidin OxyFoam S	Incidin OxyWipe S
Účinné proti obaleným virům HIV, HBV, HCV RKI 0,2004*	15 sec	30 sec
Adeno*	30 sec	1 min
Polyoma SV40*	30 sec	30 sec
EURO NORMY (nižší a vyšší biologická zátěž) + (nová EN 16615-4field test)		
Baktericidní EN 13727, EN 16615	1 min	2 min
Účinnost na kvasinky EN 16615	1 min	1 min
Účinnost na plísně EN 16615	5 min	5 min
Účinnost proti TBC a ostatním mykobakteriím EN 14348	5 min	30 min
Účinnost proti TBC a ostatním mykobakteriím EN 16615	5 min	5 min
Plně virucidní EN 14476	2 min**/30 min	30 min**
Noro virus (MNV)	1 min**/15 min	15 min
Sporicidní (B. subtilis)** EN 13704	30 min	60 min
Sporicidní (B. subtilis)** EN 16615	15 min	30 min
Clostridium difficile EN 13704**	3 min	15 min
Clostridium difficile EN 16615**	5min	5 min

* DVV 2008 ** Nižší biologická zátěž

NÁVOD K POUŽITÍ - INCIDIN OXYFOAM S



- 1 Postříkejte plochu ze vzdálenosti 30 cm.
- 2 Rozetřete přípravek, aby byla plocha rovnoměrně smočená.
- 3 Nechejte uschnout.



- 1 Nastříkejte na čistou utěrku.
- 2 Rozetřete přípravek, aby byla plocha rovnoměrně smočená.
- 3 Nechejte uschnout.

HEADQUARTER:
Ecolab
Europe GmbH
Richtistrasse 7.
8304 Wallisellen Switzerland
Tel.: +41 (0) 44 877 2001
www.ecolab.com

Ecolab
Deutschland GmbH
Ecolab - Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
Tel.: +49 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

DISTRIBUTOR:
ECOLAB s.r.o.
Vocetářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 602 156 877
www.ecolab.com

VYSOKÁ ÚČINNOST
BEZPEČÍ A EKOLOGIE
JEDNODUCHÁ APLIKACE

OBLAST POUŽITÍ

Incidin OxyFoam S:
Postřikový přípravek aplikovaný ve formě pěny. Dezinfekce a čištění ploch a povrchů zdravotnických prostředků ze všech materiálů s výjimkou mědi, mosazi a mramoru.



Incidin OxyWipe S:
Čistící a dezinfekční utěrky, určené pro dezinfekci a čištění ploch a zdravotnických povrchů ze všech materiálů s výjimkou mědi, mosazi a mramoru

NÁVOD K POUŽITÍ

Incidin OxyFoam S:
Přípravek aplikujte ze vzdálenosti cca 30cm na plochu a rozetřete. Nebo aplikujte na čistou utěrku a tou plochu otřete. Plocha musí být přípravkem zcela zvlhčena. Neotírejte, nechte zaschnout.

Incidin OxyWipe S:
Jednotlivou utěrkou otřete důkladně dezinfikovanou plochu tak, aby byla zcela zvlhčena. Neoplachujte a nechte zaschnout. Balení důkladně uzavřete.

SLOŽENÍ

100 g přípravku obsahuje:
Incidin OxyFoam S: 1,5 g peroxidu vodíku.
Incidin OxyWipe S: 1,5g peroxidu vodíku.

INFORMACE O BALENÍ O BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	POČET KUSŮ V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
INCIDIN OXYFOAM S 0,75 l s aplikátorem	6	3082080
INCIDIN OXYFOAM S 5 l	2	3091820
INCIDIN OXYWIPE S 100 ks	6	3082280

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotách pod 25 °C, na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční záření.

POUŽITELNOST PRODUKTU

Incidin OxyFoam S: spotřebujte do 24 měsíců od data výroby

Incidin OxyWipe S: spotřebujte do tří měsíců od data otevření

2018 / 041 APPR. 2018.08.06.

